

SIBIONICS GS1

Senzor za neprekinjeno
merjenje glukoze

ZANESLJIV
SENZOR,
ODLIČNA
PODPORA



14 dni brez zbadanja in skeniranja



14-dnevni
senzor



Alarm za
visoko/
nizko glukozo



Vodotesno
(IPX8)



Brez
zbadanja
v prst

NA VOLJO V LEKARNI IN SPECIALIZIRANI TRGOVINI

Kratka navodila za uporabo

I. Namestitev aplikacije Sibbonics GS1

Aplikacija je v slovenskem jeziku



II. Vstavitev senzorja GS1




Izberite mesto za namestitev senzorja na zgornji tretjini nadlakti zadaj.




Mesto očistite, npr. z alkoholnim robčkom ter **počakajte, da se koža posuši.**



Odlepite zaščitno folijo s senzorja in odprite pokrovček aplikatorja.

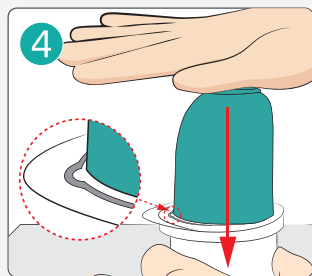


Poravnajte izboklino na aplikatorju in utor na ohišju senzorja ter na ravni gladki površini odločno potisnite aplikator navzdol v ohišje senzorja.

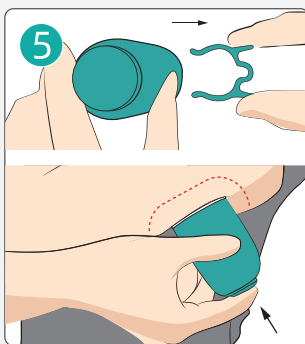

Odstanite zaščitno sponko, aplikator postavite na izbrano mesto ter pritisnite sprožilni gumb.

Previdno odmaknite aplikator stran od telesa.

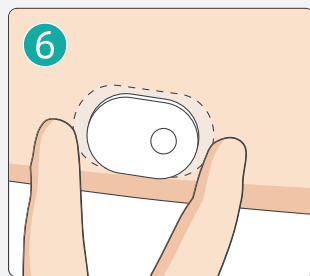

Pogladite lepilni obliž, da se trdno prilepi na kožo ter namestite dodatni obliž, priložen pakiranju.

**Video prikaz
vstavitve
senzorja**



IIIa. Povezovanje senzorja z aplikacijo



Odprite aplikacijo in kliknite „Poveži nov senzor“



Skenirajte QR-kodo na ovojnni senzorja.




Ročno vnesite kodo z ovojnine senzorja.

Senzor začne prikazovati izmerjene vrednosti 60 minut po vzpostavitvi povezave.

Pomembno:

Senzor meri raven glukoze v medceličnini. Vrednosti glukoze v medceličnini z 10-15-minutnim zamikom sledijo vrednostim v kapilarni krvi (izmerjenim z merilnikom glukoze v krvi).

IV. Povezovanje z zdravstveno ustanovo

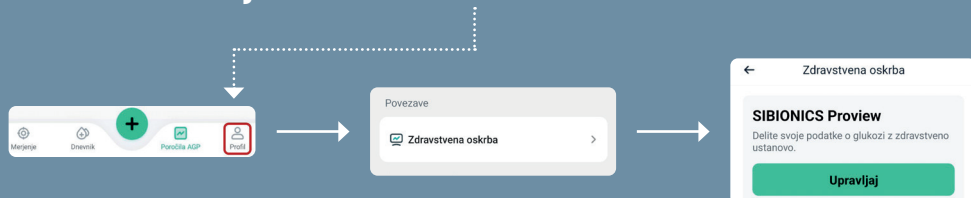

- Kaj kaže krivulja senzorja?
- Kako s krivulje razberemo vpliv hrane in drugih dnevnih aktivnosti?
- Kako lahko ukrepamo?



Za lažje življenje s senzorjem
(video razlage)

Več informacij o senzorju SIBIONICS GS1: www.zaloker-zaloker.si

- Vsi podatki na enem mestu
- Seznam skladnih telefonov



Več informacij, pomoč uporabnikom in Prvi posvet

podpora@zaloker-zaloker.si

041 930 100