

Varno odstranjevanje lancete

Lanceto **Microlet™** lahko iz sprožilne naprave **Microlet™2** odstranite brez dotikanja.

Snemite pokrovček sprožilne naprave in lanceto zabodite v zaščitno kapico lancete.



Izmet lancete v dveh korakih

Pritisnite modri gumb (a) in ga držite pritisnjena.

Izlecite napenjalni mehanizem (b).

Lanceta samodejno izpade iz sprožilne naprave v posodo za infektivne odpadke.

Sprožilna naprava MICROLET™2

Odvzem kapilarne krvi pri samokontroli sladkorne bolezni

Microlet™2 zmanjša bolečino na najmanjšo možno mero z:

- možnostjo izbire **5 različnih globin** vboda,
- **silikoniziranimi** lancetami in
- mehanizmom za **preprečevanje povratnega udara** lancete.



Sprožilna naprava **Microlet™2** s **samodejnim izmetom lancete** je priložena vsem merilnikom glukoze v krvi **Contour®** in **Breeze®2**.


7 barvnih lancet za 7 dni v tednu!

Silikonska prevleka lancete

Silikonska prevleka iglice lancete **Microlet™** naredi iglico bolj gladko, **zmanjšuje trenje** in s tem olajša vbod.

Silikon je **varen za uporabo** in **ne vpliva na rezultate** meritev z merilniki Bayer.


Redna menjava lancete zagotavlja maksimalno varnost in udobje. Ko je lanceta enkrat uporabljena, ni več sterilna in z vsakim nadaljnjim vbodom postaja bolj topa.

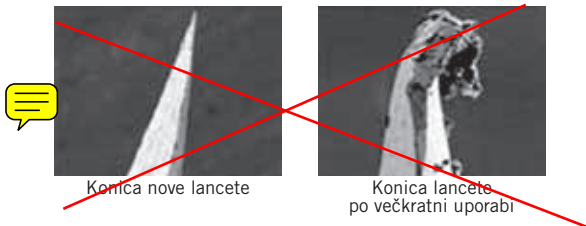


Različne globine vboda

Sivi pokrovček naprave **Microlet™2** je namenjen pridobivanju vzorca krvi iz prstnih konic. Omogoča nastavitve **5 globin vboda**.


Najplitkejši vbod

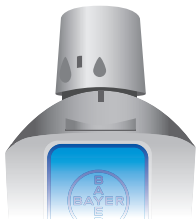

Plitek vbod

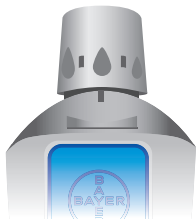

Najgloblji vbod

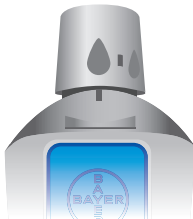

Odvzem iz alternativnega mesta

Sprožilna naprava **Microlet™2** omogoča uporabo dodatnega prozornega pokrovčka za odvzem krvi iz drugih delov telesa.



Za brezplačen pokrovček pokličite 080 1880.

Primer odvzema iz podlakti:

- Mesto odvzema močno podrgnite, da postane toplo.
- Vstavite lanceto **Microlet™2** in namestite prozorni pokrovček. Napravo nastavite na mesto vboda in pritisnite sprožilni gumb.
- Naprave ne odmakajte od kože, ampak nekajkrat (2-3 krat) pritisnite in popustite pritisk, ne da bi prekinili stik s kožo.
- Ko se oblikuje primerno velika kapljica krvi, napravo odmaknite od kože in ob tem pazite, da kapljice ne razlijete.

