

# Začasná obutev Post-Op schein





Model **Začasna obutev Post-Op** (kratkotrajna uporaba)  
**Zaprta peta**

Št. kode: 322046-  
33/34 - 47/48

#### Indikacije

- kirurški poseg na stopalih
- poškodba na sprednjem delu stopala
- odprte rane in ulkusi
- močno otekanje stopal

#### Posebne lastnosti




- Velcro® trak se lahko skrajša



- Oblika podplata



Velikost	Notranja dolžina a	Notranja širina b
33/34	224 mm	82 mm
35/36	236 mm	86 mm
37/38	250 mm	90 mm
39/40	264 mm	94 mm
41/42	278 mm	98 mm
43/44	292 mm	102 mm
45/46	306 mm	106 mm
47/48	320 mm	110 mm

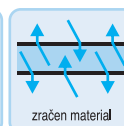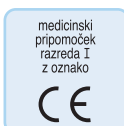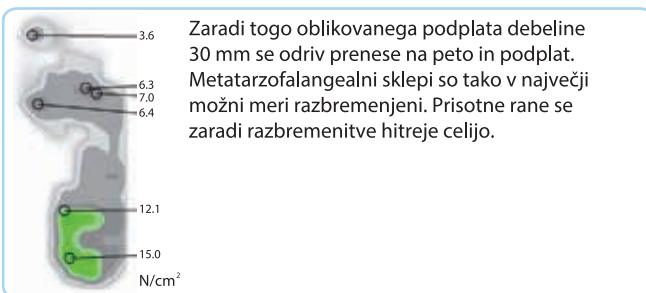



Model **Začasna obutev z razbremenitvijo  
sprednjega dela stopala**

Št. kode: 322047-  
33/34 - 47/48

Indikacije

- kirurški poseg na sprednjem delu stopala
- poškodba na sprednjem delu stopala
- odprte rane in ulkusi na dorzalnem delu stopala ali na prstih
- akutno otekanje sprednjega dela stopala zaradi burzitisa ali putike

Posebne lastnosti

- Velcro® trak se lahko skrajša



- Oblika podplata



Velikost	Notranja dolžina a	Notranja širina b
33/34	224 mm	82 mm
35/36	236 mm	86 mm
37/38	250 mm	90 mm
39/40	264 mm	94 mm
41/42	278 mm	98 mm
43/44	292 mm	102 mm
45/46	306 mm	106 mm
47/48	320 mm	110 mm

Razbremenitev sprednjega dela stopala je dosežena s 30 mm podplatom pod petnim delom stopala in večanjem njegove debeline v smeri prstov. Naravna dorzalna ekstenzija sprednjega dela stopala je med hojo preprečena, v največji možni meri pa je zmanjšan tudi plantarni pritisk. Funkcija sprednjega dela stopala je onemogočena, kar nudi najboljše pogoje za celjenje poškodbe na sprednjem delu stopala.



Model **Začasna obutev z razbremenitvijo pete**

Št. kode: 322003-  
33/34 - 47/48

Indikacije

- kirurški poseg na zadnjem delu stopala
- poškodba na zadnjem delu stopala
- odprte rane in ulkusi na področju pete
- bolečina in okužba na področju pete

Posebne lastnosti

- Velcro® trak se lahko skrajša



- Oblika podplata



Velikost	Notranja dolžina a	Notranja širina b
33/34	224 mm	82 mm
35/36	236 mm	86 mm
37/38	250 mm	90 mm
39/40	264 mm	94 mm
41/42	278 mm	98 mm
43/44	292 mm	102 mm
45/46	306 mm	106 mm
47/48	320 mm	110 mm

Razbremenitev zadnjega dela stopala je dosežena s 40 mm podplatom pod sprednjim delom stopala. Pod zadnjim delom stopala ni podplata. Razmerje med zadnjim in sprednjim delom stopala je 25 % proti 75 %, kar pomeni, da se petni del začne na sredini podplata. Kot nagiba podplata proti sprednjem delu stopala je 7°. To pomeni, da se teža telesa prenese na sprednji del stopala in je zadnji del popolnoma razbremenjen, kar omogoča najboljše pogoje za hitro celjenje rane.