

SIBIONICS GS1

PRIPOROČILA ZA USPEŠEN ZAČETEK UPORABE

1. NALOŽITE APLIKACIJO SIBIONICS



OPOMBA: Vpišite elektronski naslov, na katerega v postopku prijave prejmete potrditveno KODO.

2. VSTAVITE SENZOR (oglejte si video)



3. SKENIRAJTE QR KODO SENZORJA NA ŠKATLI



4. POČAKAJTE, DA SE SENZOR AKTIVIRA (60 MINUT)

Po 60 minutah se začnejo v aplikaciji samodejno prikazovati izmerjenje vrednosti in izrisovati krivulja.

Posebnost senzorskih sistemov merjenja glukoze je, da **ne merijo glukoze v krvi, temveč glukozo v tekočini med celicami** (v medceličnini). Glukoza ves čas počasi prehaja med krvjo in medceličnino in se uravna v približno **10-15 minutah**. Kadar je sladkor **stabilen**, je vrednost glukoze v krvi zelo podobna kot vrednost v medceličnini, kadar pa raven sladkorja v krvi **pada ali narašča** (na primer po jedi, po injiciranju insulina, ob telesni aktivnosti in ob stresu), boste opazili večje razlike.



Senzorsko vrednost in vrednost glukoze, izmerjeno z merilnikom, primerjajte z 10 do 15-minutnim zamikom.


Ob vbodu nastane na mestu vstavitve ranica in proces celjenja, ki traja od 12 do 48 ur, vpliva na izmerjene vrednosti. Zato so **izmerjenje vrednosti prvi dan ali dva lahko nekoliko nižje**.

Vsak senzor GS1 je zasnovan tako, da **deluje do 14 dni**. Po 14 dneh uporabe vas bo aplikacija SIBIONICS pozvala, da senzor zamenjate z novim.

SLIKOVNA NAVODILA VSTAVITVE SENZORJA

■ Izbira mesta vstavitve

Senzor se namešča na zadnji del nadlakti, na mehko mesto, kjer je največ **podkožne maščobe**, pod mišico, na **zgornjo tretjino nadlakti**.

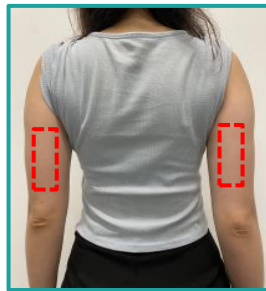

- **Izogibamo** se mestom, kjer so **znamenja, brazgotine, strije, izbokline** in mestom, kamor se **aplicira inzulin**.
- Senzorja **ne** vstavljamo **neposredno nad mišico**.

■ Priprava mesta vstavitve senzorja

Očistimo in **razkužimo** površino kože, kamor vstavljamo senzor. Uporabimo **alkoholni robček** in mesto obrišemo v smeri urnega kazalca, v treh krogih od sredine navzven.



- Za preprečevanje težav na koži **redno menjamo mesta vboda**.



- 1) Ne senzorju odlepimo zaščitno folijo.



- 2) Na aplikatorju odpremo pokrovček.



- 3) Poravnamo izboklino na aplikatorju z utorom na senzorju.



4) Senzor postavimo na ravno in trdno površino. Močno pritisnemo do konca navzdol.



5) Izvlečemo zaščitno sponko.




6) Aplikator prislonimo tesno na izbrano mesto.



7) Na vrhu aplikatorja pritisnemo sprožilni gumb.



8) Aplikator izvlečemo naravnost, stran od senzorja.

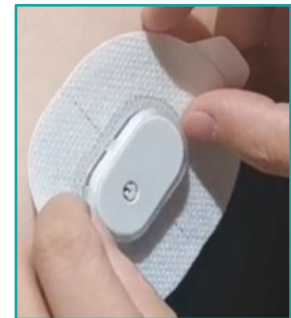

9) Namestimo priloženi obliž.